

ABPM



SunTech® *Bravo* MINI
24-HR ABP



Ambulatorio las 24 horas
Sistema de monitoreo de presión arterial

SunTech Bravo Mini

El sistema Bravo Mini de SunTech Medical® establece el estándar en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (ABPM) de 24 horas.

Validado Clínicamente

El *Bravo Mini* es sometido a pruebas de manera independiente para cumplir los requisitos de precisión y rendimiento que establecen la British Hypertension Society (BHS), el Protocolo Internacional de la European Society of Hypertension (ESH) y las normas ISO 81060-2.

Tolerancia al movimiento de SunTech

El Bravo Mini utiliza una tecnología patentada tolerante al movimiento de SunTech, obteniendo lecturas confiables incluso durante el movimiento. El Bravo Mini está validado según el protocolo de ergometría ISO 81060-2 para garantizar la precisión y la confiabilidad.

Inflado inteligente

Utiliza un algoritmo de inflado inteligente que basa la medición de inflación en mediciones anteriores para proteger que haya un inflado excesivo y proporcione una comodidad superior al paciente.






Manguitos de presión arterial Orbit™

El manguito patentado Orbit de SunTech ha sido diseñado específicamente para aplicaciones relacionadas con la monitorización ambulatoria de presión arterial. Este manguito ha sido confexionado con una manga suave, que se ciñe delicadamente al brazo para mantener la posición del manguito y proporciona la máxima comodidad al paciente durante un período prolongado de tiempo.

AccuWin Pro™ 4 Software

AccuWin Pro 4 es un programa fácil de usar basado en Windows® que permite la configuración, el análisis, la interpretación y el informe de los estudios de ABPM.

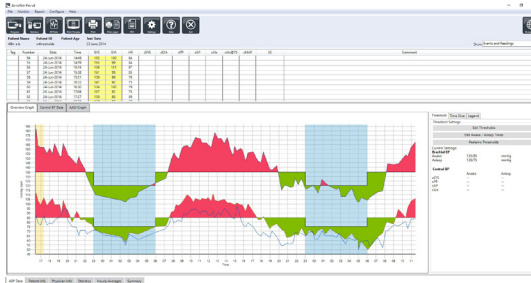

Resultado visual de la presión arterial

El exclusivo informe AccuWin Pro™ hace que la comunicación con los pacientes sea simple y efectiva, con una representación gráfica fácil de color rojo y verde de los datos del estudio de presión arterial.

Resumen interpretativo automático

Tiene la posibilidad de descifrar rápidamente los datos y crear resúmenes interpretativos según las directrices de la AHA, la ESH o el JNC 7 para:

- Análisis automatizado de niveles de normalidad en PAA
- Síndrome de bata blanca
- Estado de descenso nocturno

Ciente - Sistema de servidor

Acceso a la información del paciente desde su red con los datos del paciente almacenados de forma segura en un servidor en la red.

Especificaciones técnicas

El Sistema Bravo Mini Incluye

Bravo Mini monitor

AccuWin Pro™ 4 SE (AWP4 SE) software (Descarga)

2 manguitos Orbit™ ABPM (tamaño 2 and tamaño 3) Estuche de transporte y cinturón para el ajuste al paciente

Cable de interfaz USB

Guía para el usuario

Garantía estándar de 2 años

General Specifications

Validations:	BHS (A/A), ESH, ISO 81060-2:2013
Accuracy:	Heart Rate accurate within +/-2% or +/-3 bpm, whichever is greater. Transducer Static Pressure: ± 3 mmHg
BP Technique:	Oscillometry with step deflation
BP Range:	25-260 mmHg
HR Range:	40-200 bpm
Sampling Periods:	3 adjustable (awake, asleep, and special)
Time Intervals:	5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 and 120 min.
Data Storage:	Flash memory stores up to 250 readings
Data Transfer:	USB 3.0 (USB-C)
Power Source:	Two AA batteries
Weight:	233 grams, including batteries
Dimensions:	100mm x 70mm x 32 mm
Ingress Protection:	IP62
PC Requirements:	USB port, Windows® 7 or later
Operating Conditions:	10°C (50°F) to 50°C (122°F) 20-95% RH non-condensing
Shipping/Storage Conditions:	-20°C (-4°F) to +70°C (+158°F) 15-95% RH non-condensing



With more than 30 years dedicated to developing our world-class blood pressure technology, we are confident that we don't miss a beat - so you won't either. It's our legacy. It's SunTech Medical. **It's The Difference In Clinical Grade.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829

SunTechMed.com.CN



0413