



 SunTech® **Vet30™**
VITAL SIGNS



Monitor continuo de signos vitales
para animales de compañía

SunTech Vet30

El monitor portátil y recargable SunTech® Vet30™ mide la presión arterial (PA), la saturación de oxígeno (SpO₂) y la temperatura de manera rápida, sencilla y fiable, permitiendo realizar un control previo y posterior a un procedimiento en los animales de compañía. Es posible ajustar intervalos para que automáticamente se realicen lecturas de PA durante un período de monitorización. Mediante el uso de la probada tecnología Advantage™ de SunTech para PA veterinaria, el SunTech Vet30 toma mediciones de PA que son silenciosas, toleran el movimiento y proporcionan resultados precisos. Además, el equipo efectúa una medición continua de temperatura y SpO₂. La interfaz de pantalla táctil e intuitiva ofrece a los usuarios todas las funciones necesarias para revisar, analizar y transferir datos sobre signos vitales.

Funcionalidades estándar

Tres en uno: Probada tecnología de SunTech para PA veterinaria, ahora con oximetría de pulso y temperatura.

Fácil de usar: Intuitiva interfaz de pantalla táctil en color.

Preciso: El algoritmo de PA ha sido desarrollado específicamente para animales de compañía por expertos de una importante facultad de Veterinaria.


Monitorización continua: La monitorización durante los procedimientos es simple, con intervalos definidos por el usuario para la medición de PA.

Portátil: Equipo con funcionamiento a batería, fácil de llevar a diferentes sitios de monitorización.

Recargable: La batería se recarga cuando el equipo se enchufa a una fuente de CA, lo que reduce los residuos generados por las baterías desechables.

Memoria: Se conservan hasta 960 registros de datos, incluso con el equipo apagado. El usuario puede seleccionar mediciones específicas de la memoria del equipo y realizar un promedio automatizado de PA.

Transferencia de datos: Los datos pueden transferirse mediante Bluetooth a una aplicación de software para PC, que elabora informes y tendencias de datos. Utilice la aplicación de PC para exportar informes en formato PDF o CSV.

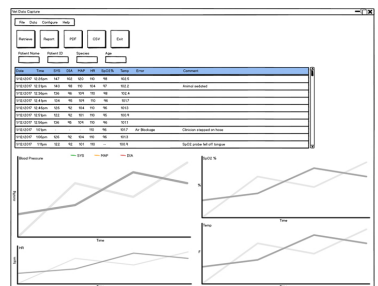



Especificaciones técnicas

El Vet30 incluye

- Monitor de sistema Vet30
- Coraza protectora en color rosa "flamenco", azul "pavo real" o verde "rana arborícola"
- Manguitos de presión arterial para uso veterinario, tamaños 1-6
- Tubo de paciente, 1,8 m
- Sonda térmica AccuVet™
- Sensor en Y de SpO₂ con clips
- Adaptador de CA

Especificaciones generales

Sistólica: 40 - 265 mmHg
Diastólica: 20 - 200 mmHg
Presión arterial media: 27 - 222 mmHg
Frecuencia cardíaca: 25 - 300 LPM

Peso del equipo: aprox. 1200 gramos (con batería)

Dimensiones: 15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm

Garantía: 2 años en el monitor
 1 año en los accesorios para AccuVet
 6 meses en los accesorios para Masimo
 90 días en manguitos/tubos

AccuVet

Rango de temperatura: 0 - 50 °C

Precisión en la temperatura: ±0,1 °C más la tolerancia del sensor de temperatura

Sensor de temperatura: compatible con YSI 400

Rango de SpO₂: 0-99%, SpO₂ funcional

Precisión de SpO₂: ±2 a 70-99%, menos de 70% no especificado

Rango de frecuencia de pulso: 18-400 LPM

Precisión de frecuencia de pulso: ±2% o 2 LPM, lo que sea mayor

Masimo™

Rango de SpO₂: 0-100%

Precisión de SpO₂: ±2% sin movimiento
 ±3% con baja perfusión

Rango de frecuencia de pulso: 0-239 LPM

Precisión de frecuencia de pulso: ±3 LPM sin movimiento

Accesorios

Coraza del SunTech Vet30

La coraza protectora desmontable se encuentra disponible en 3 colores e incluye un asa de gran practicidad.



Rosa "flamenco"



Azul "pavo real"



Verde "rana arborícola"

Adaptador de CA

El Vet30 es un equipo portátil, que en caso necesario puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Solamente hay que enchufar el adaptador de CA para recargar la batería de iones de litio en el Vet30. El adaptador de CA incluye 4 configuraciones de enchufes para ajustarse a la mayoría de los requisitos internacionales en materia de alimentación eléctrica.

Temperatura y SpO₂

AccuVet Termometría



AccuVet SpO₂ o Masimo SET® SpO₂



Manguitos para uso veterinario de SunTech



Los materiales suaves y los ángulos redondeados proporcionan una solución agradable para los manguitos. Los manguitos de PA de SunTech Medical están codificados por colores para permitir una rápida selección del tamaño. Los indicadores de rango aseguran un ajuste preciso. El suministro del equipo de PA Vet30 incluye manguitos de tamaños 1-6. **¡Los manguitos de PA para uso veterinario de SunTech pueden utilizarse con otros monitores de PA de uso veterinario! Consulte acerca de nuestro kit de conversión para manguitos de uso veterinario de SunTech.**

**SunTech Medical**[®]
The Difference in Clinical Grade™

Con más de 30 años dedicados a desarrollar nuestra tecnología de presión arterial de categoría mundial, sabemos que ni nosotros ni usted perderemos el pulso. Es nuestro legado. Es SunTech Medical. **Es la diferencia a nivel clínico.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: +1.919.654.2301
SunTechMed.com

EC REP

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Inglaterra
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Ventas)
+ 86.755.29588665 (Servicio Técnico)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN





Números de piezas del SunTech Vet30

Monitores de sistema Vet30

99-0171-00	Monitor Vet30 con AccuVet SpO ₂ , coraza en rosa "flamenco"
99-0171-01	Monitor Vet30 con AccuVet SpO ₂ , coraza en azul "pavo real"
99-0171-02	Monitor Vet30 con AccuVet SpO ₂ , coraza en verde "rana arborícola"
99-0172-00	Monitor Vet30 con Masimo SpO ₂ , coraza en rosa "flamenco"
99-0172-01	Monitor Vet30 con Masimo SpO ₂ , coraza en azul "pavo real"
99-0172-02	Monitor Vet30 con Masimo SpO ₂ , coraza en verde "rana arborícola"

Manguitos de PA para uso veterinario de SunTech

98-0400-80	Manguito n°1	Caja de 20	Rango 3-6 cm
98-0400-81	Manguito n°2	Caja de 20	Rango 4-8 cm
98-0400-82	Manguito n°3	Caja de 20	Rango 6-11 cm
98-0400-83	Manguito n°4	Caja de 20	Rango 7-13 cm
98-0400-84	Manguito n°5	Caja de 20	Rango 8-15 cm
98-0400-F1	Manguito n°6	Caja de 20	Rango 12-19 cm
98-0400-F3	Manguito n°7	Caja de 20	Rango 17-25 cm
98-0240-00	Manguitos 1-6	Paquete de 6	
91-0028-75	Tubo de paciente, 1,8 m		
91-0028-76	Tubo de paciente, 3 m		

Temperatura

52-0022-00	Sonda de temperatura, 2 m, AccuVet
52-0023-00	Sonda de temperatura, 3 m, AccuVet

SpO₂

52-0019-00	Sensor lingual en Y de SpO ₂ AccuVet, 2 m, con 2 clips
52-0020-00	Sensor de reflectancia rectal de SpO ₂ AccuVet, 1,8 m
52-0021-00	Cable de extensión para SpO ₂ de AccuVet, 2 m
52-0024-00	Sensor de SpO ₂ Masimo M-LNCS™ YI AH, 0,9 m con 3 clips
52-0026-00	Sensor (de transreflectancia) de SpO ₂ Masimo M-LNCS™ TF-I AH, 0,9 m
52-0012-01	Cable del paciente de Masimo, serie M-LNCS™, 3 m
52-0025-00	Clips de repuesto para Masimo AH SpO ₂ (3 tamaños)

Accesorios

39-0195-03	Coraza en rosa "flamenco"
39-0195-04	Coraza en azul "pavo real"
39-0195-02	Coraza en verde "rana arborícola"
19-0020-00	Adaptador de CA
98-0900-01	Batería de iones de litio de reemplazo

Números de piezas del SunTech Vet30 (continuación)

Programa de Garantía Extendida

83-0023-00 Garantía Extendida de un año

83-0023-01 Garantía Extendida de tres años

Términos y condiciones de la Garantía Extendida

La Garantía Extendida puede ser adquirida:

- En el momento de la venta original
- Antes de que finalice el período de garantía inicial